


Topcon CA-800 topograaf - koppelen en gebruiken


De Topcon CA-800 topograaf maakt gebruik van i-Map software. Het is noodzakelijk om dit eerst naar Easyfit te exporteren. Volg daarvoor onderstaande stappen.

Open de I-map software


Ga naar '**Instellingen**'

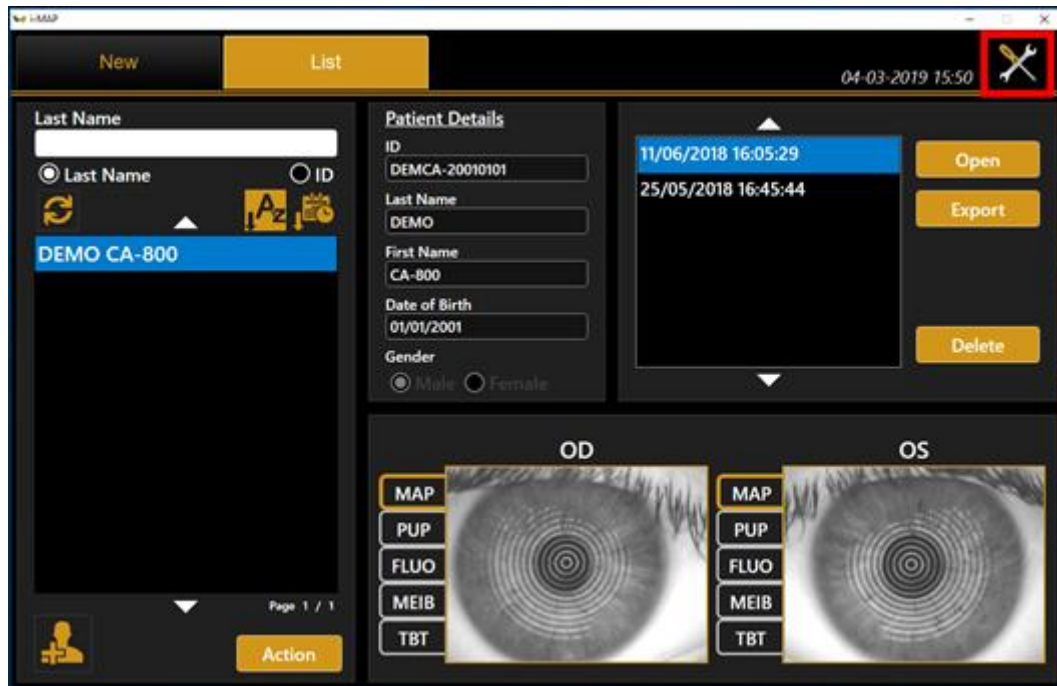


Ga naar '**Connectiviteit**'

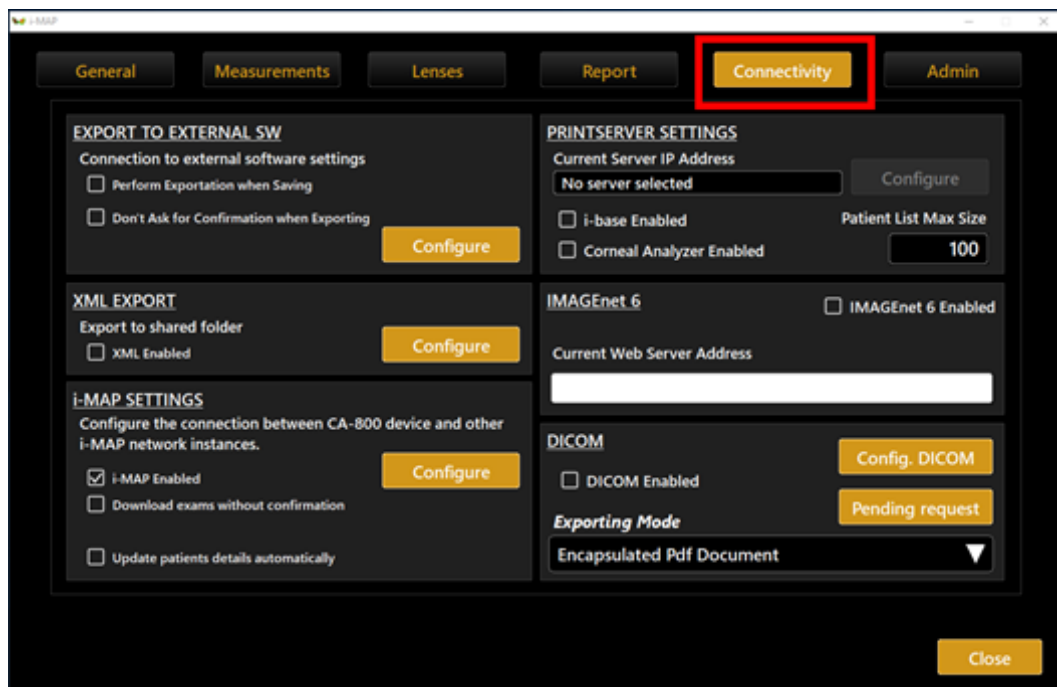

Klik in het vak '**EXPORTEREN NAAR EXTERNE SW**' op '**Configureren**'

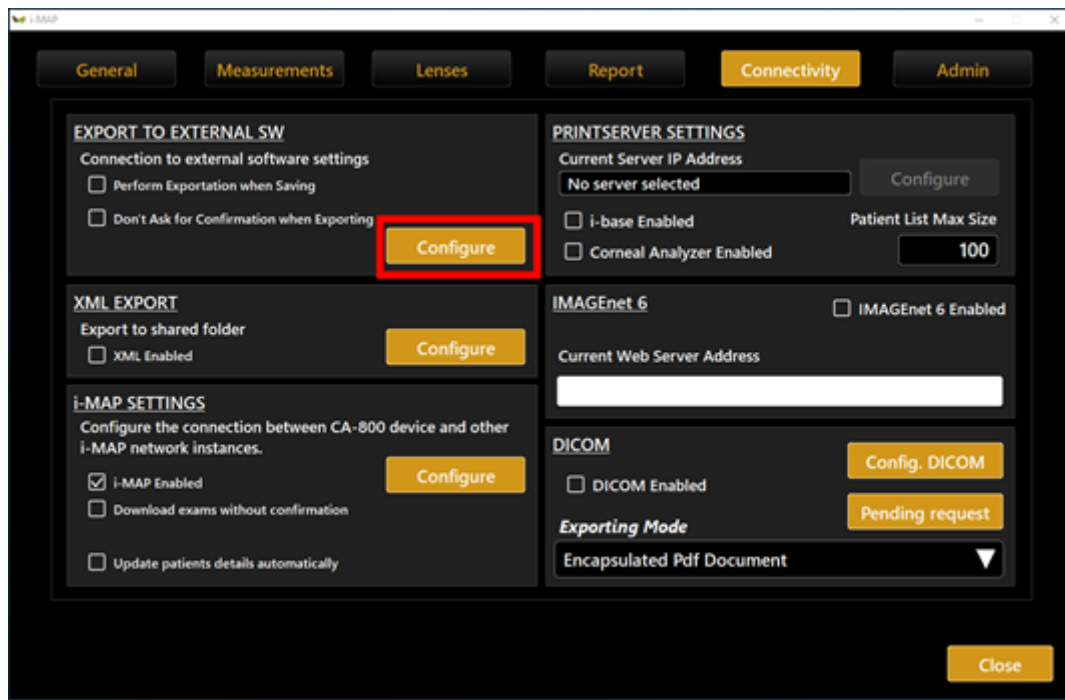

Vink in het verschenen vakje de easyfit-optie aan en klik op 'Configureren'

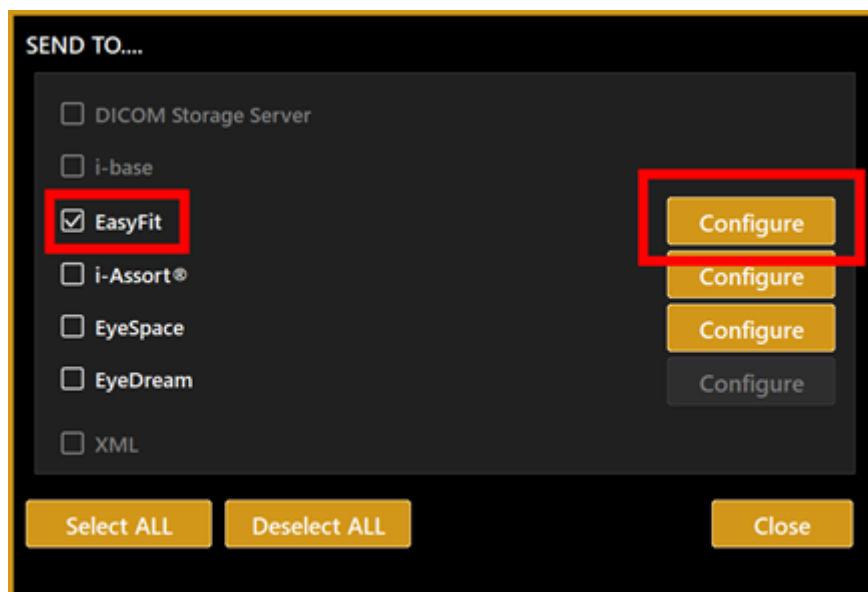

Selecteer in het weergegeven scherm een map naar waar u wilt exporteren (bijvoorbeeld 'C: \ CA800') en klik op 'Sluiten'.

SETTINGS

EasyFit

☐ Network Folder
 Current Network Folder

 Username
 Password

☒ Local Folder
 C:\CA800

MAPS EXPORT

☒ All Maps
 ☐ Currently Selected

Start de i-Map software opnieuw op

Open een meting van een patiënt die u wilt exporteren.

New

List

04-03-2019 15:57

Last Name

☒ Last Name
 ☐ ID

DEMO CA-800

Patient Details

ID

DEMCA-20010101

Last Name

DEMO

First Name

CA-800

Date of Birth

01/01/2001

Gender

☒ Male
 ☐ Female

11/06/2018 16:05:29

25/05/2018 16:45:44

OD

MAP

PUP

FLUO

MEIB

TBT

OS

MAP

PUP


FLUO

MEIB


TBT

Page 1 / 1

Klik in het meetscherm op de wereldbol in de rechter bovenhoek van het scherm

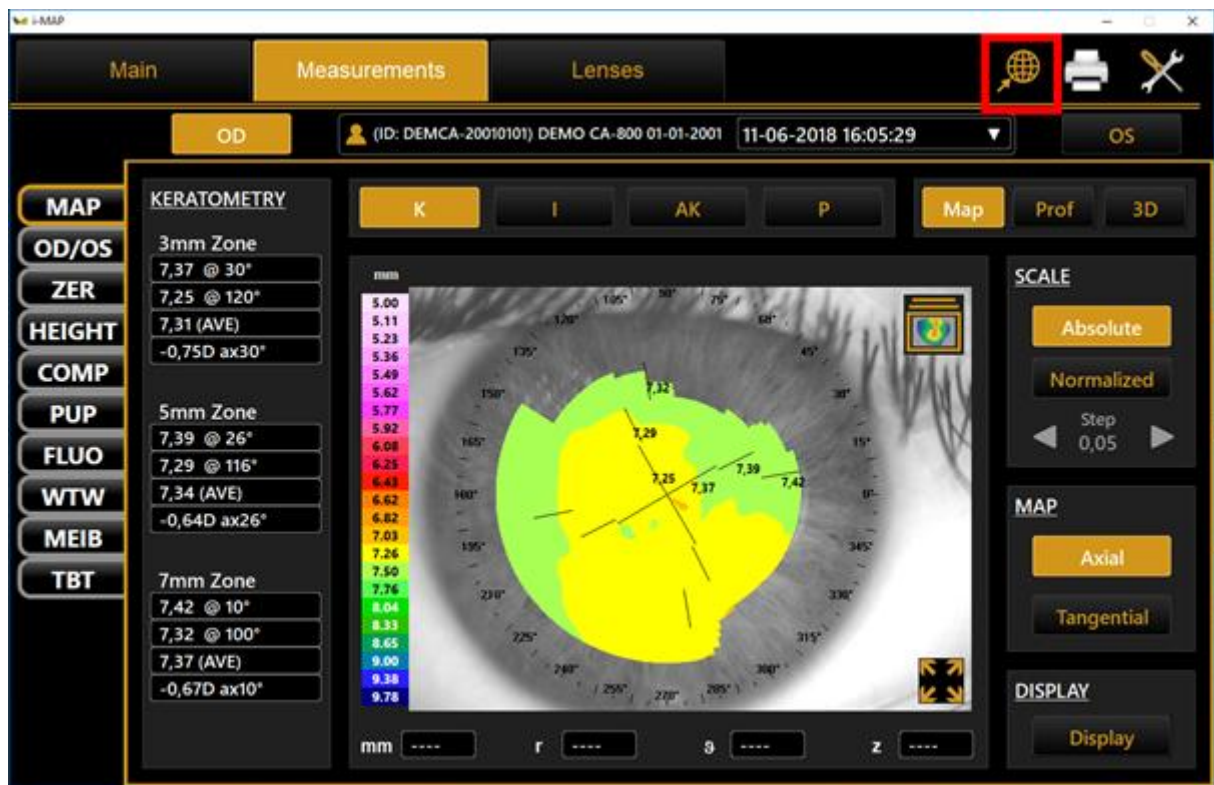

Controleer in het volgende scherm of de easyfit-optie is geselecteerd klik op 'Exporteren'

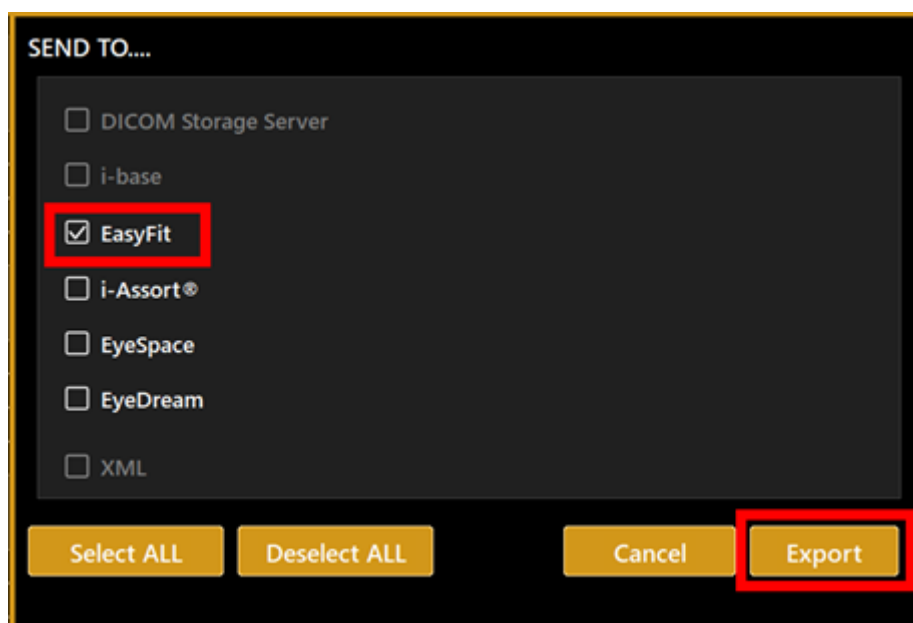

Controleer in het volgende scherm of alle instellingen kloppen, zorg ervoor dat 'Alle kaarten' zijn geselecteerd en klik op 'Exporteren'. De i-map software exporteert nu naar de geselecteerde map

The image shows a software dialog box titled 'EXPORT TO' with the 'EasyFit' logo. It has two main sections. The first section, 'EXPORT TO', contains two radio button options: 'Network Folder' and 'Local Folder'. The 'Local Folder' option is selected and highlighted with a red box. Below it, the path 'C:\CA800' is displayed. To the right of this path is a yellow button labeled 'Choose Folder'. The second section, 'MAPS EXPORT', contains two radio button options: 'All Maps' and 'Currently Selected'. The 'All Maps' option is selected and highlighted with a red box. At the bottom of the dialog are two yellow buttons: 'Cancel' and 'Export'. The 'Export' button is highlighted with a red box. There is also a 'Verify' button with a red icon next to it, located between the 'Network Folder' section and the 'Local Folder' section.

De i-Map gegevens importeren in Easyfit

Nadat de topograaf gekoppeld is kunnen de gegevens naar Easyfit worden geïmporteerd.

Ga in Easyfit naar Instellingen -> Topograaf en selecteer de Topcon CA-800-topograaf.
Klik vervolgens op 'OK'.

Instellingen

Algemeen Bedrijf **Topograaf** Modules Database Backup

Kies uw topograaf uit de volgende lijst

☐ Ik wil geen topograaf gebruiken

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ BON Eyetop | ☐ Medmont (version 6) | ☐ Tomey TMS-2 / TMS-3 / TMS-4 |
| ☐ Cassini | ☐ Medmont (version 7) | ☐ Tomey TMS-5 |
| ☐ CSO Sirius | ☐ Nidek OPD-Scan III | ☐ Topcon 7000 |
| ☐ Essilor AnaEyes | ☐ Oculus Easygraph | ☐ Topcon 8100 (CA-100 software) |
| ☐ Essilor WAM 700(+) / 800 | ☐ Oculus Keratograph | ☐ Topcon 8100 (Color Mapping software) |
| ☐ EyeTop 2005 | ☐ Oculus Pentacam | ☐ Topcon CA-100 / CA-200 |
| ☐ Haag-Streit | ☐ Phoenix | ☒ Topcon CA-800 |
| ☐ Keratron | ☐ Rexxam RET-700 | ☐ Visionix VX-120 |
| ☐ Medmont (version 3) | ☐ Rodenstock DNEye Scanner | ☐ Visionix VX-205 |
| ☐ Medmont (version 4) | ☐ Shin-Nippon CT-1000 | ☐ Zeiss i.Profiler |
| ☐ Medmont (version 5) | ☐ Tomey RT-7000 | ☐ Zeiss i.Profiler plus |


OK

Annuleren


Klik op het pictogram 'Topcon' in de werkbalk.



Selecteer de map die is geconfigureerd in de i-Map-software, om de geëxporteerde gegevens te ontvangen. (bijvoorbeeld 'C:\CA800').

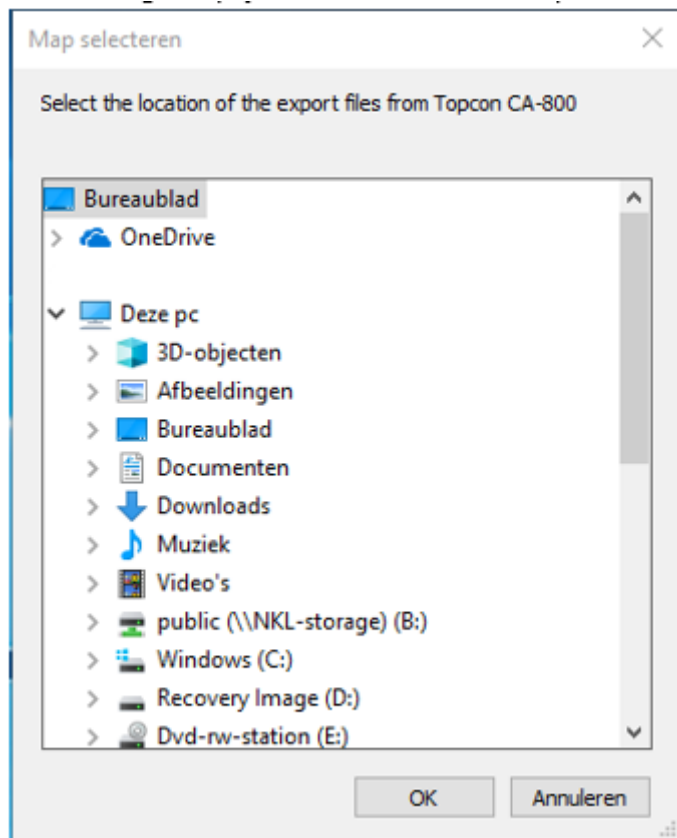

Easyfit toont nu alle geëxporteerde gegevens in die map. Selecteer de gewenste patiënt en de gewenste metingen klik vervolgens op '**Importeren**'.

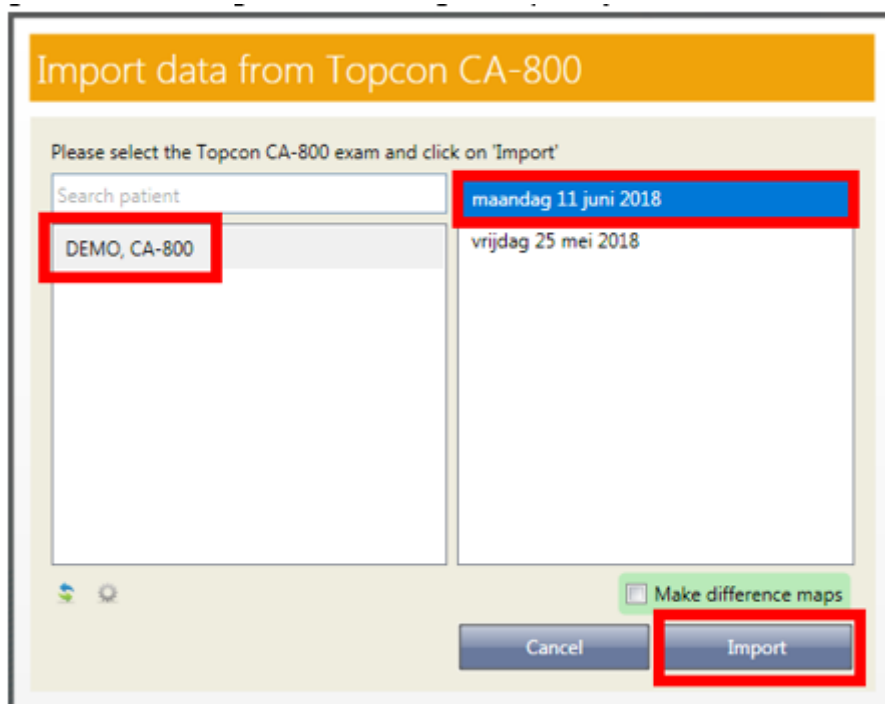

De meting wordt nu geïmporteerd.

easyfit 4.1.578.009 - DEMO, CA-800 (P1551710846)

DEMO, CA-800

Right cornea - Show details

V: 7.29 HVID: Central astigmatism: -0.77

Axis flat: 7.41 Axis: 26 Residual astigmatism:

H: Eccentr. flat: 0.11 Vertex distance: 12

S: C: Axis: Add:

Left cornea - Show details

V: 7.28 HVID: Central astigmatism: -0.52

Axis flat: 176 Axis: 176 Residual astigmatism:

H: Eccentr. flat: 0.32 Vertex distance: 12

S: C: Axis: Add:

RGF Soft Ortho-K

Select a lens

Please complete the cornea form above to calculate a lens. The fields marked yellow are mandatory.

Axial / Sagittal

RGF Soft Ortho-K

Select a lens

Please complete the cornea form above to calculate a lens. The fields marked yellow are mandatory.

Axial / Sagittal

[+] Advice Order now (15)